

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Irygator

IRRIGADOR



INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Irygator

PL

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego produktu.



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	4
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	4
3. DANE TECHNICZNE	4
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	6
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	8
7. BUDOWA	9
8. UŻYTKOWANIE	9
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	11
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	12
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	12
12. GWARANCJA I SERWIS	13
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA	13
14. PRODUCENT	13

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM


Produkt przeznaczony jest wyłącznie do osobistej pielęgnacji jamy ustnej w gospodarstwie domowym. Nie można używać go komercyjnie, przemysłowo, ani w zastosowaniach medycznych, czy też weterynaryjnych.

3. DANE TECHNICZNE

Model	AL-050231
Numer partii	613103
Zasilanie	5V – 1A
Wbudowany akumulator	Li-ion 3,7V – 1400 mAh, 5,18Wh
Stopień ochrony IP	IPX7

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

 Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.



Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.



Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.



Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z załączonym przewodem ładującym.



Przewód zasilający nieodłączalny nie może być wymieniony. Jeżeli przewód ulegnie uszkodzeniu, sprzęt staje się bezużyteczny.

- Używaj tego urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono prawidłowo zmontowane.
- Korzystaj z urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi!
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzenia, nie należy dokonywać naprawy samodzielnie. Oddaj urządzenie do naprawy specjalście lub dostarcz je do miejsca zakupu.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
- Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia zadbaj, aby w pobliżu miejsca, gdzie będzie ustawione nie pozostawały przedmioty, które mogą zostać uszkodzone, stłuczone lub przewrócone. Przewód ładowania powinien być tak poprowadzony, aby nie miał styczności z obiektami, które generują wysoką temperaturę, nie powinien też być narażony na przygniecenie, pociągnięcie lub inne uszkodzenia. Przewód ładowania nie powinien przeszkadzać w poruszaniu się osób i zwierząt domowych, gdyż może to doprowadzić do potknięcia, przewrócenia lub urazów ciała.
- Unikaj wystawiania urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Pod wpływem ekstremalnych temperatur elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia.

- Nie narażaj przewodu ładującego na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów urządzenia lub wywołać spięcie, a nawet porażenie prądem. Nie zanurzaj irygatora w wodzie na głębokość powyżej 1 m oraz na czas powyżej 30 minut.
- Unikaj wystawiania wbudowanego akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie demontuj, nie modyfikuj, nie zwieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku. Akumulator w urządzeniu jest niewymienialny przez użytkownika.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.










Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

	<p>Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.</p>
	<p>Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).</p>
IPX7	<p>Stopień ochrony IPX7, zgodnie z którym urządzenie jest wodoodporne do głębokości zanurzenia maksymalnie 1 m przez nie dłużej niż 30 min (dotyczy części urządzenia znajdującej się najniżej).</p>
	<p>Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.</p>
	<p>Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.</p>
	<p>Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.</p>
	<p>Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.</p>
	<p>Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić wytłoczkę – papier.</p>
	<p>Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie</p>

z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Irygator
- Wymienne dysze (2 szt.)
- Przewód ładujący
- Instrukcja obsługi



JEŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR obok:



7. BUDOWA



8. UŻYTKOWANIE



PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY URZĄDZENIA, A TAKŻE PO JEJ ZAKOŃCZENIU SPRAWDŹ KAŻDY Z ELEMENTÓW, CZY NIE JEST USZKODZONY. USZKODZONE ELEMENTY NIE MOGĄ ZOSTAĆ UŻYTE, GDYŻ MOŻE TO GROZIĆ USZKODZENIEM CIAŁA UŻYTKOWNIKA.

MONTAŻ I DEMONTAŻ WYMIENNYCH DYSZ

Wyjmij z opakowania irygator i jedną z dysz. Włóż dyszę do otworu u góry urządzenia i delikatnie dociśnij. Przycisk blokady dyszy powinien kliknąć. Upewnij się, że dysza została poprawnie zamontowana i samoczynnie nie odłącza się od irygatora.

Aby zdjąć dyszę, wciśnij przycisk blokady dyszy i delikatnie pociągnij dyszę do góry.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ŁADOWANIA AKUMULATORA W URZĄDZENIU ZADBAJ O TO, ABY MIEĆ SUCHĘ RĘCĘ.

PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIE MOŻE SIĘ NIECO NAGRZEWAĆ, JEST TO NORMALNE ZJAWISKO.



STARAJ SIĘ NIE ROZŁADOWYWAĆ CAŁKOWICIE AKUMULATORA, PONIEWAŻ TAKIE DZIAŁANIE MOŻE DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA JEGO ORAZ PRODUKTU.

WBUDOWANY AKUMULATOR NIE NADAJE SIĘ DO WYMIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ABY WYMIENIĆ AKUMULATOR SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM PRODUCENTA.

Wtyk USB dołączonego przewodu ładującego podłącz do zasilanego adaptera USB (nie jest częścią zestawu) o parametrach wyjściowych 5 V = 1A lub o większym prądzie. Drugi koniec przewodu podłącz do złącza ładowania znajdującego się z przodu irygatora. Jeśli przewód nie pasuje do złącza, obróć wtyczkę o 180°.

Po rozpoczęciu ładowania dioda Custom/CH zacznie migać. Gdy ładowanie dobiegnie końca, to dioda zgaśnie.

TRYBY PRACY

Irygator oferuje pracę w czterech trybach:

- Normal – tryb normalnego ciśnienia
- Soft – tryb delikatnego ciśnienia
- Pulse – tryb pulsacyjny
- Custom/CH – tryb regulowanego ciśnienia

Urządzenie włącza i wyłącza się przyciskiem ON/OFF. Kolejne wciśnięcia przycisku MODE po włączeniu urządzenia powodują przetaczanie się między kolejnymi trybami pracy. Przy aktualnie wybranym trybie pracy zaświeci się dioda stanu.

W trybie Custom/CH długie przytrzymanie przycisku MODE włącza możliwość regulacji ciśnienia. Regulacja odbywa się w zakresie 10-90 psi (*pound per square inch*, funt na cal kwadratowy) przez krótkie wciskanie przycisku MODE. Wybór potwierdza kolejne długie przytrzymanie przycisku MODE.

KORZYSTANIE Z IRYGATORA

Upewnij się, że produkt jest wyłączony, a następnie otwórz korek zbiornika na wodę znajdujący się z tyłu urządzenia. Ustaw urządzenie poziomo

otwartym wlotem na wodę do góry. Napełnij zbiornik wodą, najlepiej filtrowaną, i zamknij korek zbiornika na wodę.



NIE POLECAMY NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA NA WODĘ CIECZAMI INNYMI NIŻ WODA, A SZCZEGÓLNICIE PŁYNAMI DO HIGIENY JAMY USTNEJ, ROZTWORAMI SODY OCZYSZCZONEJ, NAPARAMI ZIOŁOWYMI. MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO OSADZANIA SIĘ OSADÓW, POWSTAWANIA ZANIECZYSZCZEŃ I ODBARWIEŃ. W SKRAJNYCH PRZYPADKACH MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA URZĄDZENIA.

Włącz irygator i wybierz tryb pracy. Wsuń dyszę do ust i celuj strumieniem wody w przestrzenie między zębami oraz wzdłuż linii dziąseł. Otwórz delikatnie usta, aby woda mogła swobodnie przepływać.

Po zakończonej irygacji wyłącz urządzenie przyciskiem ON/OFF. Wsuń pojemnik na wodę pociągając go delikatnie w dół i wylej z niego pozostałą wodę. Pozostawienie wody w urządzeniu może sprzyjać namnażaniu się w niej bakterii. Po osuszeniu zbiornika na wodę wsuń go z powrotem na miejsce.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

REGULARNE I WŁAŚCIWIE PRZEPROWADZANE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZAPEWNIĄ DŁUGI CZAS UŻYTKOWANIA SPRZĘTU ORAZ JEGO BEZAWARYJNĄ PRACĘ.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ TYLKO, GDY URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE.

NIEDOPUSZCZALNE JEST CZYSZCZENIE ŻADNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA W ZMYWARCE.

NIE ZANURZAJ IRYGATORA W WODZIE NA GŁĘBOKOŚĆ POWYŻEJ 1 M ORAZ NA CZAS POWYŻEJ 30 MINUT.

Elementy urządzenia mogą być czyszczone pod bieżącą wodą o niskim ciśnieniu i temperaturze. W przypadku silnych zabrudzeń możliwe jest wykorzystanie łagodnych detergentów, np. nieskoncentrowanych płynów do mycia naczyń. Następnie należy dokładnie wysuszyć powierzchnie elementów urządzenia ręcznikiem papierowym lub tekstylnym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Dysze należy myć pod bieżącą wodą, po czym pozostawić do wyschnięcia.

IRYGATOR

Okresowo należy czyścić zbiornik na wodę z gromadzących się w nim osadów oraz kamienia. W tym celu stosuj odpowiednie środki pozwalające usunąć osad i kamień. Preparaty mają postać proszku lub płynu. Należy postępować zgodnie z dołączonymi do nich instrukcjami obsługi. Po użyciu preparatu dokładnie wypłucz wnętrze zbiornika i pozostaw go do wysuszenia.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie włącza się	Sprawdź, czy akumulator jest naładowany. Być może żywotność akumulatora dobiegła końca – skontaktuj się z serwisem producenta.
Ciśnienie wody z irygatora jest słabe	Sprawdź, czy dysza, której używasz nie jest uszkodzona lub zatkana. Sprawdź, czy pojemnik na wodę jest czysty. Gromadzące się wew. urządzenia osady mogą wpływać na jego prac..
Urządzenie nie ładuje się	Sprawdź, czy przewód ładujący został poprawnie podłączony i nie jest uszkodzony. Sprawdź, źródło zasilania, do którego podłączony jest przewód ładujący jest sprawne. Być może żywotność akumulatora dobiegła końca – skontaktuj się z serwisem producenta.

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi skontaktuj się z serwisem producenta.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia urządzenia podczas jego użytkowania rób jedynie po jego wyłączeniu, ostygnięciu i zamknięciu zabezpieczenia, trzymając za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Gwarancja nie obejmuje wymiennych dysz, które są elementem eksploatacyjnym. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu. Materiały eksploatacyjne (wymienne końcówki) nie są objęte gwarancją producenta.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach

Irrigador

PT

Aparência gráfica
ou cor do produto
pode variar
do produto real.



IPX7



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	14
2. USO PREVISTO	15
3. DADOS TÉCNICOS	15
4. REGRAS DE USO SEGURO.....	15
5. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	17
6. CONTEÚDO DO PACOTE.....	19
7. CONSTRUÇÃO	20
8. USO	20
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	22
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	23
11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.....	23
12. GARANTIA E SERVIÇO	24
13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NOVA ABORDAGEM.....	24
14. FABRICANTE	24

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher nosso produto. Acreditamos que seu uso será um prazer para você. Por favor, leia o manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto, especialmente as instruções para uso seguro. Guarde este manual para referência ao usar o produto. O manual também está disponível em formato eletrônico na página do fabricante.

2. USO PREVISTO


O produto destina-se apenas a cuidados orais pessoais em casa. Não pode ser usado comercialmente, industrialmente ou em aplicações médicas ou veterinárias.

3. DADOS TÉCNICOS

Modelo	AL-050231
Número do lote	613103
Energia	5V = 1A
Bateria incorporada	Íon de lítio 3,7V = 1400mAh, 5,18 Wh
Grau de proteção IP	IPX7

4. REGRAS DE USO SEGURO

Por favor, leia essas dicas com atenção. O não cumprimento dessas instruções pode ser perigoso ou ilegal.

 Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas e falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura para que os perigos envolvidos sejam compreendidos.

 A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.



As crianças não devem brincar com o aparelho.



O dispositivo destina-se a ser usado exclusivamente com a cabo de carregamento incluída.



O cabo de alimentação não removível não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o equipamento torna-se inutilizável.

- Utilize este aparelho apenas quando estiver devidamente montado.
- Use o dispositivo apenas conforme descrito neste manual do usuário!
- Não use um dispositivo danificado. Em caso de danos, não repare sozinho. Devolva o dispositivo para reparação a um especialista ou entregue-o no local de compra.
- Não utilize o aparelho em locais onde seja proibido utilizar equipamentos elétricos e onde possa causar interferências ou outros perigos.
- Não ligue ou use o aparelho perto de materiais inflamáveis.
- Não utilize indevidamente o aparelho.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
- O fabricante não é responsável por quaisquer problema causado por auto-modificações do dispositivo.
- Ao usar o dispositivo, certifique-se de que não há objetos que possam ser danificados, quebrados ou virados perto do local onde o irrigador será colocada. O cabo de carregamento deve ser roteado de modo que não entre em contato com objetos que gerem alta temperatura, nem deve ser exposto a esmagamentos, puxões ou outros danos. O cabo de carregamento não deve interferir com o movimento de pessoas e animais de estimação, pois isso pode levar a tropeços, tombamentos ou ferimentos no corpo.
- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 ° C / 32 ° F ou acima de 40 ° C / 104 ° F). Componentes feitos de plástico podem se deformar, o que pode afetar o funcionamento do dispositivo ou levar à sua completa corrupção.
- Não exponha o cabo de carregamento a água e outros líquidos. Isso pode afetar adversamente a operação e a vida útil dos componentes do dispositivo ou causar um curto-circuito ou mesmo um choque

elétrico. Não mergulhe o irrigador em água a uma profundidade superior a 1 m e por mais de 30 minutos.

- Evite expor a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 ° C / 32 ° F ou acima de 45 ° C / 113 ° F). Temperaturas extremas podem afetar a sua vida útil. Evite o contato da bateria com líquidos e objetos de metal, pois podem causar danos totais ou parciais. Não desmonte, modifique, curto-circuite ou jogue a bateria no fogo – isso pode causar uma explosão e incêndio. Coloque a bateria usada ou danificada num recipiente especial. A bateria do dispositivo não é substituível pelo utilizador.

5. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



O símbolo indica que a embalagem contém um manual de instruções que deve ser lido antes do uso.



Informações importantes sobre o uso do dispositivo.



ATENÇÃO! Leia atentamente o conteúdo dos avisos. O não cumprimento deles pode resultar em danos ao dispositivo e, em casos extremos, perda de saúde ou vida.



O dispositivo é marcado com o símbolo de um recipiente de resíduos riscado, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser utilizados ou descartados com outros resíduos domésticos após o fim de sua vida útil. O usuário é obrigado a se desfazer dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, entregando-os em um local designado onde tais resíduos perigosos serão submetidos ao processo de reciclagem. A coleta deste tipo de resíduo em locais próprios e o processo adequado de sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos tem um efeito benéfico na saúde humana e no meio ambiente. Para obter informações sobre o local e o método de descarte ambientalmente seguro

	<p>de equipamentos eletrônicos e elétricos usados, o usuário deve entrar em contato com a autoridade governamental local apropriada, o ponto de coleta de lixo ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.</p>
	<p>Símbolo de papelão (material de embalagem).</p>
<p>IPX7</p>	<p>Grau de proteção IPX7, de acordo com o qual o dispositivo é impermeável a uma profundidade máxima de imersão de 1 m por não mais de 30 minutos (aplica-se à parte mais baixa do dispositivo).</p>
	<p>A marca no produto indica que o produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.</p>
	<p>A embalagem do aparelho pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.</p>
	<p>Os resíduos devem ser eliminados em recipientes apropriados.</p>
	<p>Designação do recipiente no qual a caixa deve ser descartada - papel.</p>
	<p>Designação do recipiente no qual a caixa deve ser descartada - papel.</p>
	<p>De acordo com a Diretiva 2013/56/UE relativa à eliminação de pilhas e acumuladores, este produto está marcado com o símbolo de um caixote do lixo riscado. O símbolo indica que as baterias ou acumuladores usados neste produto não devem ser descartados com o lixo doméstico normal, mas tratados de acordo com a diretiva e os regulamentos locais. Não é permitido eliminar acumuladores juntamente com os resíduos urbanos indiferenciados.</p>

Os usuários de baterias e acumuladores devem utilizar os pontos de coleta disponíveis para esses itens, o que permite sua devolução, reciclagem e descarte. Na UE, a coleta e a reciclagem de baterias e acumuladores estão sujeitas a procedimentos separados. Para saber mais sobre os procedimentos locais de reciclagem de baterias e acumuladores, entre em contato com o conselho municipal, autoridade de gerenciamento de resíduos ou aterro sanitário.

6. CONTEÚDO DO PACOTE

O conjunto inclui:

- Irrigador
- Bicos intercambiáveis (2 pçs)
- Cabo de carregamento
- Manual de instruções



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA ESTIVER FALTANDO OU DANIFICADO, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR.



RECOMENDAMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM EM CASO DE RECLAMAÇÃO. MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.


Pode baixar o manual eletrônico no seguinte endereço da Internet:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR:



7. CONSTRUÇÃO

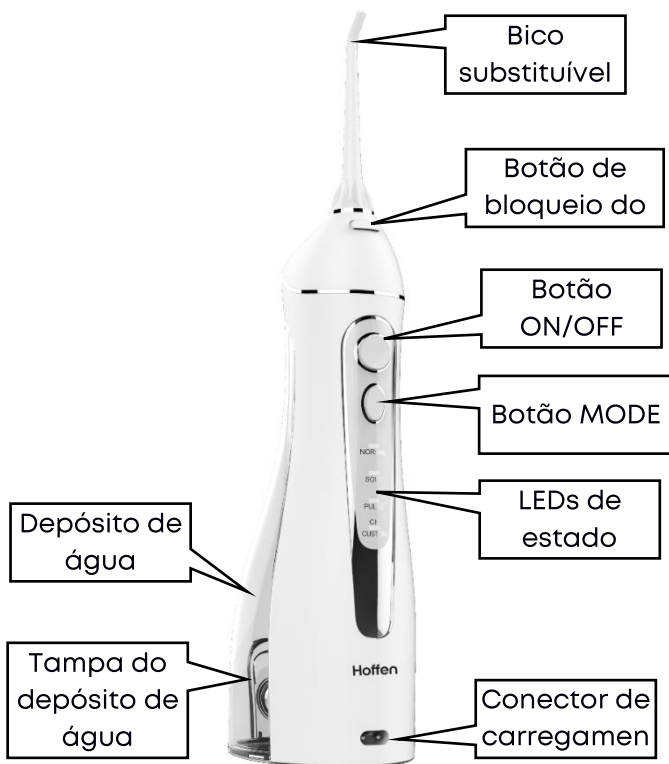

8. USO



ANTES DE INICIAR O TRABALHO, BEM COMO APÓS SUA CONCLUSÃO, VERIFIQUE CADA ELEMENTO QUANTO A DANOS. ELEMENTOS DANIFICADOS NÃO PODEM SER USADOS, POIS ISSO PODE RESULTAR EM FALHA DO DISPOSITIVO OU FERIMENTOS AO USUÁRIO.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BICOS SUBSTITUÍVEIS

Remova o irrigador e um dos bicos da embalagem. Insira o bico no orifício na parte superior da unidade e pressione suavemente. O botão de bloqueio do bico deve clicar. Certifique-se de que o bico esteja instalado corretamente e não se desconecte do irrigador automaticamente.

Para remover o bico, pressione o botão de bloqueio do bico e puxe-o suavemente para cima.

CARREGAR A BATERIA

ANTES CARREGAR A BATERIA NO DISPOSITIVO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS SUAS MÃOS ESTÃO SECAS.

O DISPOSITIVO PODE FICAR UM POUCO QUENTE DURANTE O CARREGAMENTO, ISSO É NORMAL.



TENTE NÃO DESCARREGAR A BATERIA COMPLETAMENTE, POIS ISSO PODE CAUSAR DANOS PERMANENTES À BATERIA E AO PRODUTO.

A BATERIA INCORPORADA NÃO É SUBSTITUÍVEL PELO UTILIZADOR. PARA SUBSTITUIR A BATERIA, CONTACTE O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE.

Conecte o plugue USB do cabo de carregamento incluído a um adaptador USB alimentado (não incluído) com saída de 5 V= 1A ou corrente mais alta. Conecte a outra extremidade do cabo ao conector de carregamento na frente do irrigador. Se o fio não encaixar no conector, gire o plugue 180°. Ao iniciar o carregamento, o LED Custom/CH começará a piscar. Quando o carregamento terminar, o LED apagar-se-á.

MODOS DE OPERAÇÃO

O irrigador oferece quatro modos de operação:

- Normal – modo de pressão normal
- Suave – modo de pressão suave
- Pulso – modo de pulso
- Personalizado/CH – modo de pressão ajustável

O dispositivo liga e desliga com o botão ON/OFF. Pressionamentos subsequentes do botão MODE após ligar o dispositivo causam a alternância entre os modos de operação subsequentes. Com o modo de operação atualmente selecionado, o LED de estado acenderá.

No modo Personalizado/CH, segurar o botão MODE por um longo tempo ativa a capacidade de ajustar a pressão. O ajuste é feito na faixa de 10–90 psi (*pound per square inch*) pressionando brevemente o botão MODE. A seleção confirma-se segurando o botão MODE.

USO DO IRRIGADOR

Certifique-se de que o produto está desligado e, em seguida, abra a tampa do depósito de água na parte de trás do aparelho. Posicione o aparelho horizontalmente com a entrada de água aberta para cima. Encha o depósito com água, de preferência filtrada, e feche a tampa do depósito de água.



NÃO RECOMENDAMOS ENCHER O DEPÓSITO DE ÁGUA COM LÍQUIDOS QUE NÃO SEJAM ÁGUA, ESPECIALMENTE LÍQUIDOS DE HIGIENE ORAL, SOLUÇÕES DE BICARBONATO DE SÓDIO, INFUSÕES DE ERVAS. ISSO PODE LEVAR A SEDIMENTOS, IMPUREZAS E DESCOLORAÇÃO. EM CASOS EXTREMOS, ISSO PODE LEVAR A DANOS AO DISPOSITIVO.

Ligue o irrigador e selecione o modo de funcionamento. Insira o bico na boca e aponte o jato de água para os espaços entre os dentes e ao longo da linha da gengiva. Abra a boca suavemente para que a água possa fluir livremente.

Após a conclusão da irrigação, desligue o dispositivo com o botão ON/OFF. Retire o depósito de água puxando-o suavemente para baixo e despeje a água restante. Deixar água no dispositivo pode promover a multiplicação de bactérias. Depois de secar o depósito de água, deslize-o de volta ao lugar.

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



A LIMPEZA E MANUTENÇÃO REGULARES E REALIZADAS ADEQUADAMENTE GARANTIRÃO UMA LONGA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E SUA OPERAÇÃO SEM PROBLEMAS.

A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO SÓ PODEM SER REALIZADAS COM O APARELHO DESLIGADO. NÃO É PERMITIDO LIMPAR QUALQUER PARTE DO APARELHO NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA.

NÃO MERGULHE O IRRIGADOR EM ÁGUA A UMA PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1 M E POR MAIS DE 30 MINUTOS.

Os componentes do dispositivo podem ser limpos sob água corrente de baixa pressão e temperatura. No caso de sujeira forte, é possível usar detergentes suaves, por exemplo, líquidos de lavagem de louça não concentrados. Em seguida, seque bem a superfície dos elementos do dispositivo com um papel ou uma toalha têxtil e deixe secar completamente num local ventilado. Os bicos devem ser lavados em água corrente e depois deixados secar.

Limpe periodicamente o depósito de água do acúmulo de sedimentos e incrustações. Para este fim, use meios apropriados para remover depósitos e incrustações. As formulações estão na forma de pó ou líquido. Siga

as instruções de uso que as acompanham. Depois de usar o produto, enxágue bem o interior do depósito e deixe-o secar.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de qualquer problema com o aparelho, vale a pena ler as dicas a seguir.

O aparelho não liga	Verifique se a bateria está carregada. A duração da bateria pode ter chegado ao fim – contacte o serviço de assistência do fabricante.
A pressão da água do irrigador é fraca	Verifique se o bico que está a usar não está danificado ou entupido. Verifique se o depósito de água está limpo. Os sedimentos acumulados dentro do dispositivo podem afetar o seu trabalho.
O aparelho não carrega	Verifique se o cabo de carregamento foi devidamente ligado e não está danificado. Verifique se a fonte de alimentação à qual o cabo de carregamento está conectado está a funcionar. A duração da bateria pode ter chegado ao fim – contacte o serviço de assistência do fabricante.

Se o problema não for resolvido, entre em contato com o serviço técnico do fabricante.

11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, depois de o desligar da rede elétrica, arrefecimento e limpeza, guarde-o numa sala seca, longe de fontes de calor e humidade. É melhor colocar o dispositivo fora do alcance de crianças e animais.


TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Recomenda-se transportar o dispositivo na sua embalagem original. Durante o transporte, não exponha o dispositivo a vibrações e choques excessivos. Se for necessário mover o dispositivo durante a sua utilização, faça-o apenas depois de ter sido desligado, arrefecido e fechado, segurando o manípulo. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas ou humidade.

12. GARANTIA E SERVIÇO

O produto tem garantia de 3 anos a partir da data de venda do produto. Em caso de defeito, o produto deverá ser devolvido à loja onde foi adquirido, lembrando-se de apresentar o comprovante de compra. A garantia não cobre bicos substituíveis que sejam consumíveis. O produto deve estar completo e em sua embalagem original. Os consumíveis (cabeças e baterias substituíveis) não estão cobertos pela garantia do fabricante.

13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NOVA ABORDAGEM

 Por este meio mPTech Sp. z o. o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

14. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsóvia
Polónia

Telefone: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Feito na China